

# Sport Concept

RX Lenses



Sport Concept

Design ideal for sports people  
Il design ideale per gli sportivi



# Sport Concept

RX LENSES

Sport Concept gives to the users a visual advantage during outdoor activities.


This freeform design focuses on the distance and near vision fields where clear vision is needed the most. Whether participating in a competitive sport or outdoor leisure activity, the wide distance area is crucial to take in surroundings, avoid obstacles ahead or plan the next move.

Sport Concept fornisce un vantaggio visivo durante le attività all'aperto.

*Questo design Free Form si focalizza sui campi visivi lontani e vicini, in cui la visione chiara è più necessaria. Sia che si tratti di uno sport competitivo o di un'attività ricreativa all'aperto, la visione ad ampio raggio è fondamentale per osservare l'ambiente circostante, per evitare gli ostacoli davanti a sé e pianificare la prossima mossa.*

## Sharp vision for high performance sports

Visione nitida per sport ad alte prestazioni

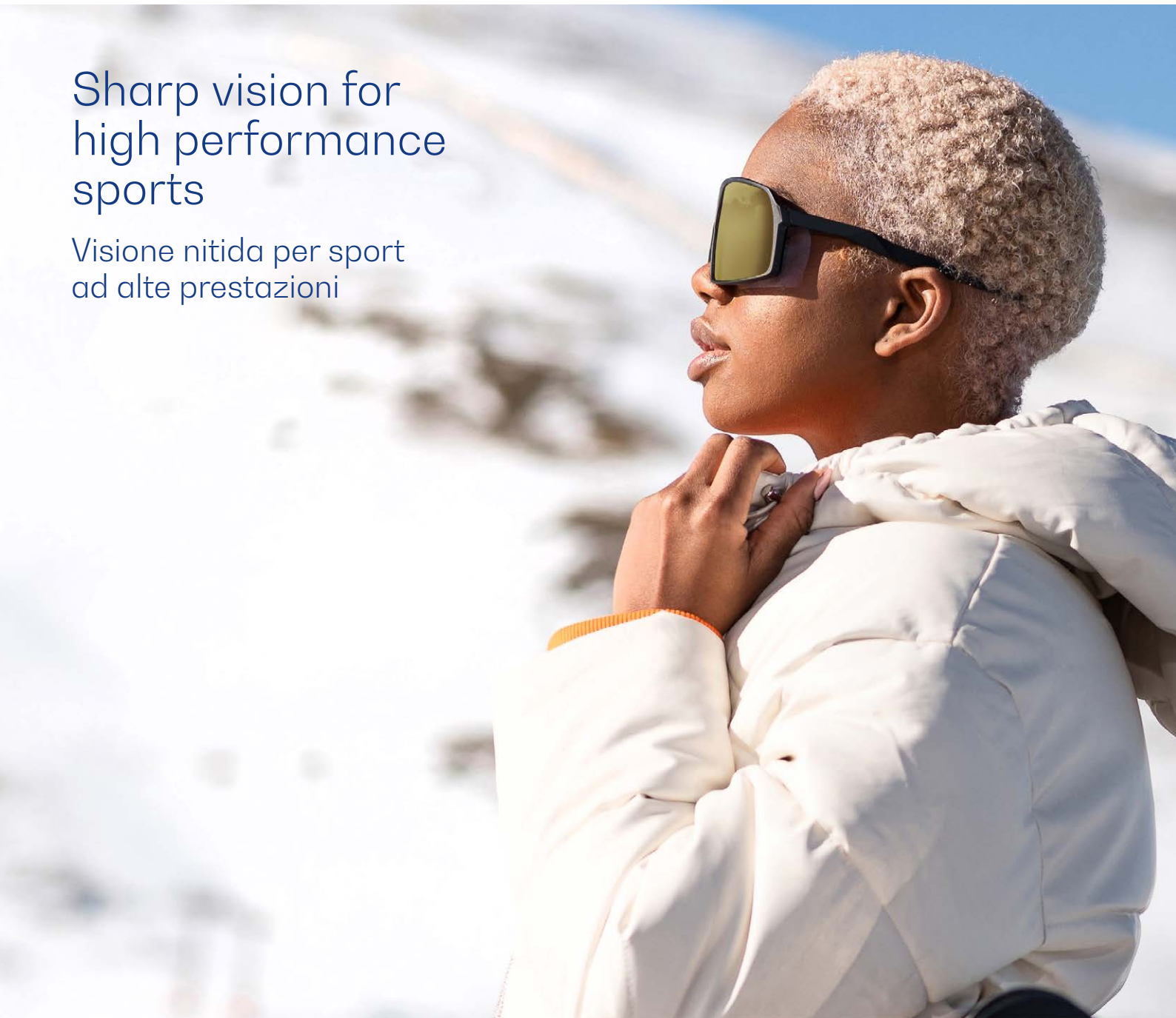

Sport Concept Design is ideal for sports people or those regularly in active and dynamic environments.

- Sharp vision for high performance sports
- Perfect for wrap sport frames
- Prioritising distance vision but offering more than adequate near vision

Il design Sport Concept è ideale per gli sportivi o per chi si trova regolarmente in ambienti attivi e dinamici.

- *Visione nitida per sport ad alte prestazioni*
- *Perfetta per le montature avvolgenti*
- *Priorità alla visione a distanza ma con la garanzia di una visione ravvicinata adeguata*

## AVAILABILITY

Disponibilità

### Progressive

#### INDEX 1,6

Sport Evolution

#### INDEX 1,59

Sport Poly

#### INDEX 1,53

Sport Trivex

### Single Vision Free Form

#### INDEX 1,6

Sport Evolution

#### INDEX 1,59


Sport Poly

#### INDEX 1,53

Sport Trivex


## Performance Progressive Lenses

### Prestazioni Lenti Progressive

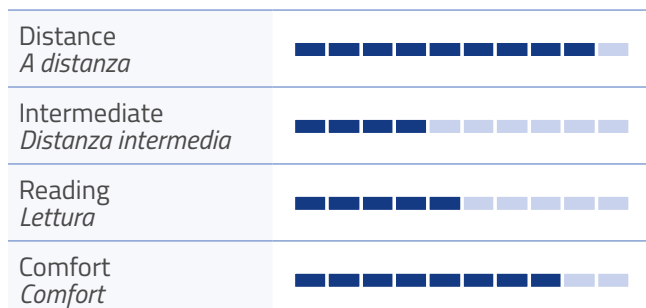

## Performance Single Vision Free Form


### Prestazioni Single Vision Free Form

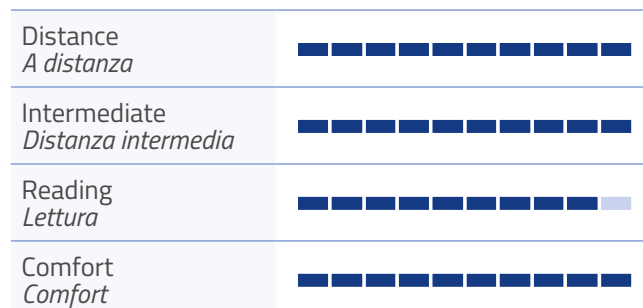

Vision with progressive lens  
*Visione con lente progressiva*



Vision with Single Vision Free Form lenses  
*Visione con lente Single Vision Free Form*

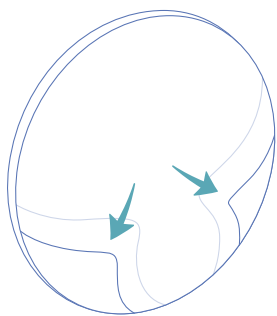


## Aberration Free I-Tech

Ophthalmic lenses have power errors when viewing away from the optical centre of the lens. Aberration Free I-Tech technology uses specially developed software which modifies the entire lens to correct power errors. Each lens is customized to the prescription.

- Provides more consistent optical performance
- Clearer image quality

*Le lenti oftalmiche hanno degli errori di potere quando si guarda al di fuori del centro ottico della lente. La tecnologia Aberration Free I-Tech utilizza un software appositamente sviluppato che modifica l'intera lente per correggere gli errori di potere. Ogni lente è personalizzata in base alla prescrizione.*

- Fornisce migliori prestazioni ottiche
- Immagini più nitide

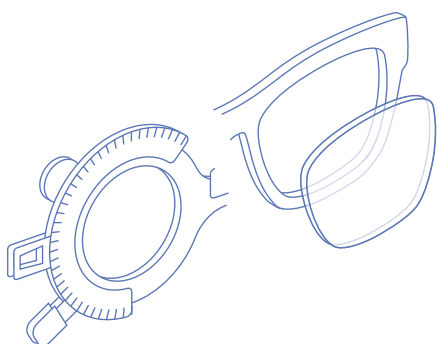

## Face Fit

Face Fit considers the patient's parameters and individual's choice of frame (back vertex distance, pantoscopic tilt and face wrap) to compensate the prescription and to offer the best possible comfort conditions once the glasses are worn.

- Ideal for sports wrap frames
- Sharper and higher resolution vision

*Face Fit esamina i parametri del paziente (vertex, angolo pantoscopico, angolo di avvolgimento) e della montatura scelta, per bilanciare la prescrizione e offrire le migliori condizioni di comfort possibili una volta indossati gli occhiali.*

- Ideale per le montature sportive
- Visione più nitida e con una risoluzione maggiore

For any further information you can contact your sales representative.

Per maggiori informazioni contatta il tuo commerciale di riferimento.